

REDEORTO aligner

**Conforto e transparência
de verdade**

Tudo sobre os novos
alinhadores REDEORTO



Sumário

1.

conheça nossos alinhadores

2.

Indicações

2.1

Dentes separados

2.2

Dentes desalinhados ou encavalados

2.3

Dentes para frente

2.4

Mordida aberta anterior leve

2.5

Um dente cruzado na região anterior

3.

Como iniciar o tratamento?

4.

Como funciona o tratamento?

5.

Como colocar e retirar os alinhadores?

6.

Como higienizar o alinhador?


7.

Quanto custa o tratamento?

Intro dução

Os novos alinhadores REDEORTO foram desenvolvidos em parceria com a Aditek Ortodontia, uma empresa reconhecida como uma das principais fabricantes de produtos ortodônticos do mundo, exportando para todos os continentes.

Nossos alinhadores contam com alta tecnologia para proporcionar conforto, resultados rápidos e estética agradável. Nosso sistema de produção é totalmente digital, o que facilita a avaliação técnica do interessado e agiliza a produção dos alinhadores.

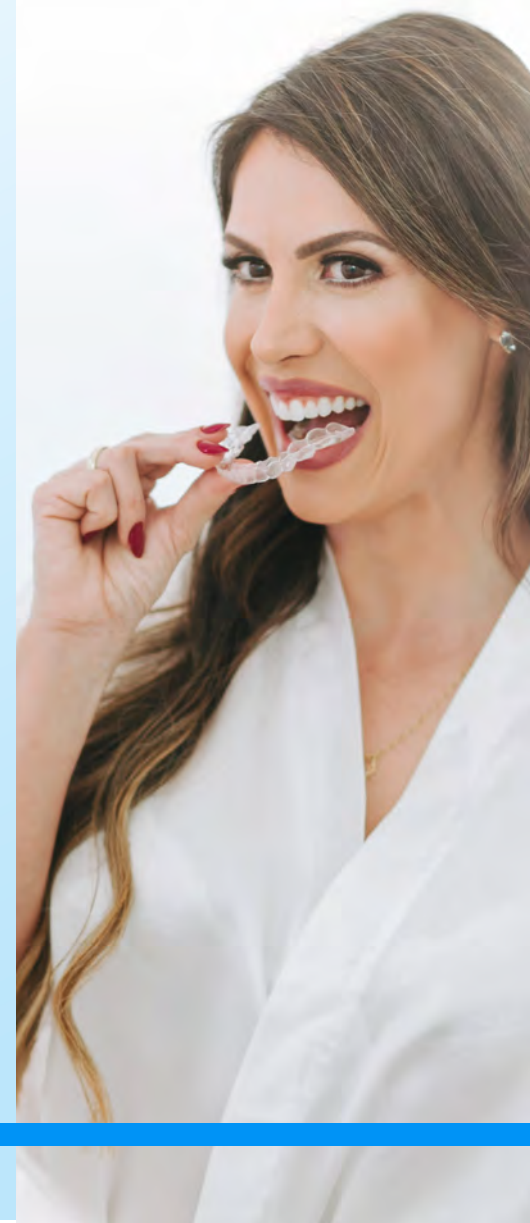


Conheça nossos alinhadores

- ✓ Rápidos
- ✓ Confortáveis
- ✓ Alta tecnologia
- ✓ Transparentes
- ✓ Previsíveis




Indicações

Dentes cruzados

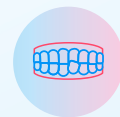

Com os alinhadores REDEORTO podemos corrigir 1 dente cruzado na região anterior dependendo da sua oclusão com o dente antagonista (o encaixe do dente de cima, com o dente de baixo). Para muitos casos os alinhadores são eficientes, melhorando a estética do sorriso.

Mordida aberta

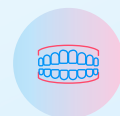


A mordida aberta é um tipo de maloclusão que corresponde à ausência de contato entre os dentes superiores e inferiores. Alguns casos leves de mordida aberta anterior podem ter melhora estética com o uso de alinhadores transparentes.

Dentes encavalados




Isso acontece quando não há espaço suficiente na arcada dentária e os dentes acabam ficando tortos ou mal posicionados.

Dentes Separados

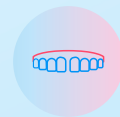


São os espaços entre os dentes. Condição muito comum, os pequenos diastemas podem ser fechados com alinhadores REDEORTO.

Dentes para Frente

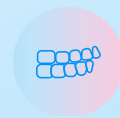


Conhecido também como overjet, podemos melhorar os casos mais leves e corrigir a inclinação dos dentes da frente para que fique mais harmônico e estético.


Como iniciar o tratamento?

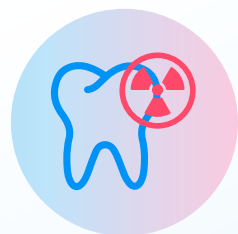


Radiografia

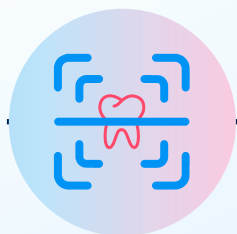


Escaneamento digital 3D

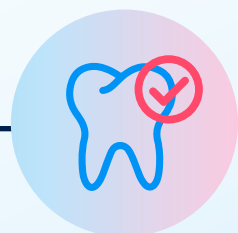

Aprovação

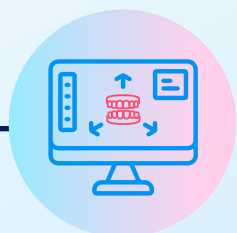

Setup virtual

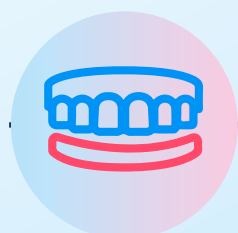

Confecção dos alinhadores

O primeiro passo é realizar a avaliação com seu dentista, que pode pedir uma radiografia, depois é feita um escaneamento digital 3D que vai ser usado para a elaboração do setup virtual. Após a aprovação do setup pelo seu dentista, os alinhadores são liberados para a confecção e o paciente inicia o tratamento.

Como funciona o tratamento?



Os alinhadores REDEORTO devem ser utilizados pelo maior tempo possível e a nossa recomendação é de, no mínimo, 22 horas por dia, removendo apenas para alimentação e higienização.

A cada duas semanas, geralmente, é feita a troca do modelo do alinhador para que o tratamento continue evoluindo. Em alguns casos, pode ser que o seu ortodontista oriente de forma diferente. Essa troca permite a movimentação constante dos dentes.



Como colocar e retirar os alinhadores?



Para inserir os alinhadores nas arcadas dentárias, você deve encaixar primeiro a parte anterior nos dentes da frente e depois a parte posterior, sempre com muito cuidado, evitando movimentos bruscos.

Não morda o alinhador para encaixar. Sempre utilize o mordedor de silicone. Os roletes devem ser mordidos com ambos os alinhadores posicionados nas arcadas, na parte posterior e anterior, por algumas vezes nos dois primeiros dias após a troca das placas.

Para remover o alinhador, sempre desadaptar primeiro a parte lingual com o auxílio do “gancho” (Solt) e depois a parte anterior.

Como higienizar o alinhador?



Após remover o alinhador, lave abundantemente em água corrente ou com espuma de limpeza e guarde sempre no estojo fornecido, evitando deixá-lo em ambientes quentes ou expostos ao sol. Bebidas como café, vinhos e sucos podem manchar os alinhadores e devem ser evitadas.



Quanto custa o tratamento?

Entre em contato com uma unidade REDEORTO e
marque sua avaliação gratuita. Acesse o site e encontre
a mais próxima de você

<https://redeorto.com.br/alinhadores/unidades>



Obrigada

REDEORTO
aligner